

# OptraStick

MIT DER PRAKTISCHEN HAFTKLEBESPITZE



## OptraStick

- einfaches Aufnehmen
- starker Halt
- präzises Platzieren

## OptraStick – das Applikationsinstrument mit der praktischen Haftklebespitze


Mit **OptraStick** lassen sich Restaurationen einfach und schnell aufnehmen, halten und platzieren. Bereits mit leichtem Druck haften Kleinteile und Restaurationen punktgenau an der Klebespitze von OptraStick; so z.B.:

- Inlays, Onlays, Kronen oder Veneers aus **IPS Empress** und **IPS e.max**
- Veneers aus **IPS d.SIGN** und **IPS InLine** oder
- Inlays, Onlays, ¾-Kronen aus **Academy Gold** und **Harmony Medium**




OptraStick Refill / 50 Stück

## Klinischer Fall mit IPS e.max Press

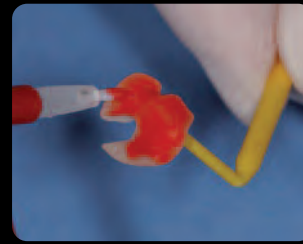

1. Auftragen des IPS Ceramic Ätzzgels

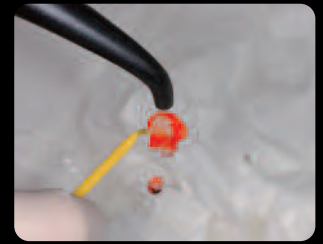


2. Entfernen des IPS Ceramic Ätzzgels mit dem Wasserstrahl



3. Silanisieren mit Monobond-S



4. Auftragen des Befestigungszementes Multilink Automix

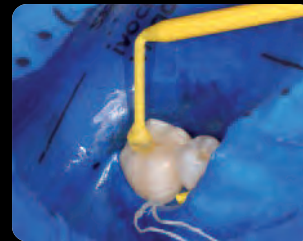

5. Platzierung der Restauration



6. Entfernen des OptraSticks mit Hilfe eines Instrumentes

Quelle: Dr. R. Watzke, Ivoclar Vivadent AG, Schaan

## WEITERE NÜTZLICHE CLINICAL ACCESSORIES FÜR INDIREKTE RESTAURATIONEN



**Anatomisch ausgeformter OptraDam® – für die absolute Trockenlegung** ermöglicht einen deutlich erleichterten Zugang zu einem stark vergrößerten Behandlungsraum.



**OptraGate® ExtraSoft für die relative Trockenlegung** hält Lippen und Wangen jetzt noch schonender ab und erweitert sanft den Behandlungsraum.



**OptraFine® – hochleistungsfähiges Diamantpoliersystem**  
Hochästhetischer Glanz mit dem 3-Schritt-Poliersystem für Keramikrestaurationen – zur extra- und intraoralen Anwendung geeignet.

Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften.  
Gedruckt in Liechtenstein  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein  
614845/0808/d/BVD

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
FL-9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel. +423 / 235 35 35  
Fax +423 / 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 (0) 79 61 / 8 89-0  
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26  
[info@ivoclarvivadent.de](mailto:info@ivoclarvivadent.de)  
[www.ivoclarvivadent.de](http://www.ivoclarvivadent.de)

**ivoclar**  
**vivadent**<sup>®</sup>  
passion vision innovation