

# SR Ivocap® Elastomer

Der spezielle Kunststoff auf Elastomerbasis



# SR Ivocap® Elastomer

**SR Ivocap Elastomer** – ein speziell entwickelter Kunststoff auf Elastomerbasis. Durch die Herstellung im SR Ivocap-Verfahren eignet sich dieses Material für folgende Einsatzgebiete:

- Positioner
- Mundschutz für diverse Sportarten wie Boxen, Eishockey etc.
- Knirscherschienen
- Schienen, bei denen eine Elastizität erwünscht ist.

## Vorteile

- Hohe Passgenauigkeit
- Angenehmer Tragekomfort
- Geschmacks- und geruchsneutral

## Verarbeitungshinweise

- Die Verarbeitung erfolgt ausschliesslich im SR Ivocap-Verfahren
- Immer zwei Gusskanäle ansetzen
- Nach dem Injizieren des Kunststoffes 10 Minuten stehen lassen
- Polymerisationszeit 45 Minuten bei 95–100°C
- Material kühl und dunkel lagern

## Lieferform

- 10 SR Ivocap Elastomer-Kapseln Polymer 20 g
- 10 SR Ivocap Elastomer Kapseln Monomer 16,5 g

## Anwendungsbeispiel


Herstellen eines Positioners



Duplikat Modell



Modellierter Sportlerschutz

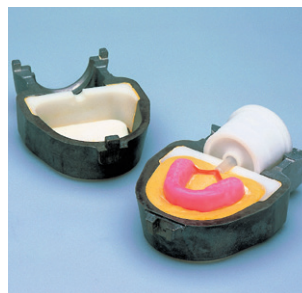

Einbettung in der SR Ivocap-Küvette



Setup



Beispiele für fertige Arbeiten



Dies ist ein Produkt aus unserer Kategorie Abnehmbare Prothetik. Produkte aus dieser Kategorie sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt.

Hersteller und Vertrieb  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland  
**Ivoclar Vivadent GmbH**  
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2  
D-73479 Ellwangen, Jagst  
Tel. +49 7961 8890  
Fax +49 7961 6326  
info@ivoclarvivadent.de  
www.ivoclarvivadent.de

Darstellungen und Angaben enthalten keine Zusicherung von Eigenschaften.  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein  
562768/0311/de

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation