

AdheSE[®]

Selbstätzendes Adhäsiv



Techniktolerant
und zeitsparend

AdheSE®

DAS ADHÄSIV,
DAS ZEIT SPART.

Selbstätzendes, lichthärtendes, gefülltes Zweikomponenten-Adhäsivsystem für Schmelz und Dentin.

Das Adhäsivsystem AdheSE begeistert durch seine Einsatzmöglichkeiten. Da keine Phosphorsäure-Ätzung notwendig ist, sparen Sie Zeit und können postoperative Sensitivitäten auf ein absolutes Minimum reduzieren.

Reduktion postoperativer Sensitivitäten

AdheSE ist unempfindlich gegenüber unterschiedlichen Oberflächenbedingungen des Dentins. Bei trockenem oder feuchtem Dentin und selbst bei starkem Verblasen bleibt die Funktion des Primers unverändert.

Indikationen



- lichthärtende Composite-, Ceromer- und Compomer-Restaurationen
- nach dem Lichthärten des Bondings für Stumpfaufbauten mit dual- oder selbthärtenden Composites



Die klare Farbcodierung – Grün für den Primer und Schwarz für das Bonding – verhindert Verwechslungen. Übersichtliche Piktogramme auf dem Pad erklären sich selbst.

ÜBERZEUGENDE ERGEBNISSE

Verbund


Mit AdheSE kann durch den niedrigen pH-Wert ein gut ausgeprägtes Schmelz-Ätzmuster erzeugt werden. Dies bildet die Grundlage für einen optimalen Verbund zum Schmelz.

Techniktoleranz


AdheSE ist unempfindlich gegenüber unterschiedlichen Oberflächenbedingungen des Dentins. Bei trockenem oder feuchtem Dentin und selbst bei starkem Verblasen bleibt die Funktion des Primers unverändert.

Haftwerte

AdheSE haftet sofort – initiale Haftwerte auf Dentin und Schmelz sind besonders wichtig, damit sich keine Spannungen aufbauen können. AdheSE besitzt diese Initialhaftung in ausgeprägtem Masse.

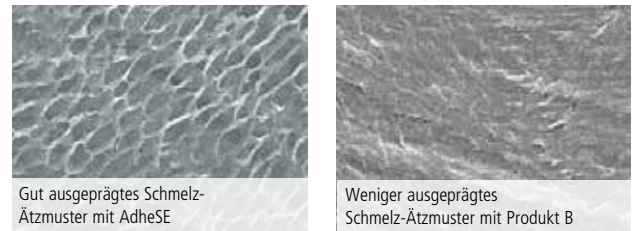

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der Abteilung Forschung & Entwicklung der Ivoclar Vivadent AG/Schaan, 2002

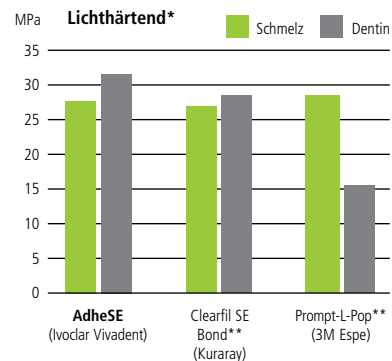

*Scherhaftwerte nach 24 Stunden.

**Keine eingetragenen Marken der Ivoclar Vivadent AG.
Prof. Dr. K.-J. Reinhardt, Universität Münster, Deutschland, 2002

LIEFERFORMEN

Intro Pack

- 1 Flasche AdheSE Primer 5 g
- 1 Flasche AdheSE Bonding 5 g
- 1 AdheSE Pad
- je 25 Applikatoren grün und schwarz



Refill

- 1 Flasche AdheSE Primer 5 g



Refill

- 1 Flasche AdheSE Bonding 5 g



Refill

- 1 Flasche AdheSE Primer 5 g
- 1 Flasche AdheSE Bonding 5 g



Applikator Refill

- 25 Applikatoren grün
- 25 Applikatoren schwarz



DIREKTE RESTAURATION



1
Der Ausgangszustand



2
30 s Applikation
AdheSE Primer



3
Primer mit starkem
Luftstrom verblasen



4
AdheSE Bonding applizieren



5
10 s Lichthärten des
Bondings




6
Das Ergebnis

Quelle: Forschung & Entwicklung Ivoclar Vivadent AG,
Schaan, Liechtenstein, 2002



Direkte Füllungstherapie

AdheSE® ist ein Produkt aus der Kategorie „Direkte Füllungstherapie“. Produkte aus dieser Kategorie decken den Ablauf der direkten Füllungstherapie ab – von der Vorbereitung bis zur Pflege der Restauration. Die Produkte sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine erfolgreiche Verarbeitung und Anwendung.

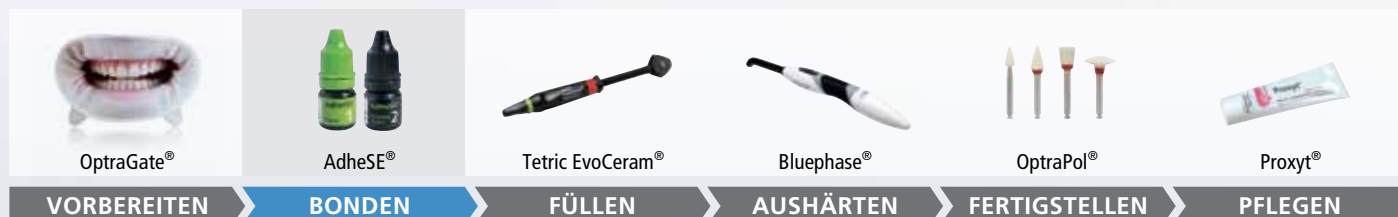

DIES SIND WEITERE PRODUKTE AUS DIESER KATEGORIE:

Tetric EvoCeram® Bulk Fill

Das Bulk-Composite



Seitenzahnfüllungen, jetzt noch effizienter

- Füllen bis zu 4 mm – dank patentiertem Lichtinitiator Ivocerin®
- Modellieren leicht gemacht – dank geschmeidiger Konsistenz
- Polymerisieren... Fertig ist die ästhetische Restauration

Bluephase® Style

Das Polymerisationsgerät



Die kleinste LED für jeden Einsatz

- Jede Hand – Ergonomisch für Frau und Mann
- Jedes Material – Universell dank Polywave® LED mit Breitbandspektrum
- Jederzeit bereit – Optionaler Netzbetrieb dank Click & Cure

Sie wollen mehr über Produkte aus der Kategorie „Direkte Füllungstherapie“ wissen? Wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner von Ivoclar Vivadent oder informieren Sie sich auf: www.ivoclarvivadent.com

Hersteller und Vertrieb:
Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland:

Ivoclar Vivadent GmbH
Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 (0) 79 61 / 889-0
Fax +49 (0) 79 61 / 63 26
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

Darstellungen und Angaben enthalten
keine Zusicherung von Eigenschaften.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
de/2013-10-31

ivoclar
vivadent
passion vision innovation