

Telio[®]

Alles für Provisorien



ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation

Telio®

Mit richtig geplanten Provisorien zu erfolgreichen finalen Restaurationen

Das Provisorium hat eine zentrale Rolle in der Behandlungsplanung. Es ermöglicht bereits einen Ausblick auf die definitive Versorgungslösung. Funktion, Phonetik und Ästhetik der finalen Restauration werden vorbestimmt und können jederzeit angepasst werden. Das ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen permanenten Restauration.

Die Lösung für diesen essenziellen Behandlungsschritt heisst Telio®, ein komplettes Produktsystem für Provisorien mit unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten.



Provisorium aus Telio

Perfekte finale Restauration durch geplantes Provisorium.
Dr. Andreas Kurbad, Deutschland

Telio umfasst Materialien für Kurz- bis Langzeitprovisorien über den gesamten Behandlungsablauf hinweg. Die Produkte sind chemisch und farblich kompatibel – für Verlässlichkeit und Flexibilität.

Telio® CS

Für Zahnärzte



Telio CS bietet Produkte für die Herstellung der gesamten Vielfalt an Provisorien direkt beim Zahnarzt. Dazu kommen ergänzende Produkte.

Telio CS C&B ist ein selbsthärtendes, temporäres Kronen- und Brückenmaterial für die Herstellung von Provisorien mit kurzer Tragedauer direkt beim Zahnarzt. Aufgrund der farblichen Abstimmung eignet sich das Material perfekt als Unterfütterung von Restaurationen aus Telio CAD und Telio Lab.

Darüber hinaus ermöglichen die lichthärtenden Einkomponentenmaterialien Telio CS Inlay und Telio CS Onlay temporäre Versorgungen ohne Verwendung eines provisorischen Zementes oder Adhäsivs.

Vervollständigt werden die Telio CS-Produkte durch einen Desensibilisierer (Telio CS Desensitizer) und geeignete Zemente (Telio CS Link, Telio CS Cem Implant) für die temporäre und semi-permanente Eingliederung.

KURZE BEHANDLUNGSZEIT

Telio® CAD

Für CAD/CAM-Anwender



Individuelle Implantat-Versorgungen mit Telio® CAD A16, IPS e.max® CAD A14/A16 und dem passenden Zement Multilink® Hybrid Abutment.

Telio CAD bietet besonders wirtschaftliche Lösungen für gefräste Provisorien mit mittlerer Tragedauer.

Telio CAD ist ein hochvernetzter Polymer-Block für das Fräsen provisoischer Versorgung, der sich durch seine grosse Homogenität auszeichnet. Die Verarbeitung von Telio CAD kann wahlweise mit einem System der CAD/CAM-Partner oder über externe Fräszentren erfolgen*.

Dank des optimierten Fertigungsprozesses erhält die Restauration eine glatte Oberfläche, die sich schnell und effizient polieren lässt. Für besonders ästhetische Versorgung kann der Inzisalbereich mit lichthärtenden Schichtmassen (z. B. SR Nexco®) oder mit Telio Lab individualisiert werden.

Implantatversorgungen mit Telio CAD A16

Telio CAD A16 dient mit seiner vorgefertigten Schnittstelle der Herstellung temporärer Hybrid-Abutment-Kronen. Diese eignen sich als Sofortprovisorien für den Front- und Seitenzahnbereich und unterstützen zudem das individuelle Gingiva-Management.

*Weitere Informationen unter www.ivoclarvivadent.com

MITTLERE BEHANDLUNGSZEIT

Telio® Lab

Für Zahntechniker



Mit Telio Lab lassen sich Langzeitprovisorien in der Cold-Technik herstellen. Auch bei komplexen Patientenfällen kann damit der Grundstein für eine erfolgreiche definitive Versorgung gelegt werden.


Telio Lab ist ein Kunststoff, der sich zur Herstellung metallgestützter und metallfreier Kronen und Brücken eignet – sowohl auf natürlichen Zahnstümpfen als auch auf Implantat-Abutments. Darüber hinaus eignen sich Telio Lab-Restaurationen als Instrument der Therapieplanung, zur Form- und Phonetikkontrolle sowie zur harmonischen Gingivaergänzung.

Die Komponenten von Telio Lab LC bestehen aus lichthärtenden, pastösen Schneidmassen und fließfähigen Malfarben. Diese dienen der Individualisierung und Ergänzung der Telio-Versorgungen. Neben der Cut-back-Technik können die einzelnen Komponenten zum Antragen eines Emergenzprofils und zum Aufbau von Okklusionen verwendet werden.

LANGE BEHANDLUNGSZEIT

Telio – das flexible System für alle temporären Indikationen ...

- ↳ ... erhöht die Flexibilität bei der Wahl der temporären Restaurationsmaterialien in Abhängigkeit von der klinischen Situation und der Patientenerwartung.
- ↳ ... vermeidet durch die Kompatibilität der Produkte zeit- und kosten- aufwendige (Wieder-)Anfertigungen.
- ↳ ... bietet die besten Voraussetzungen für den definitiven, ästhetischen und funktionsgerechten Zahnersatz.

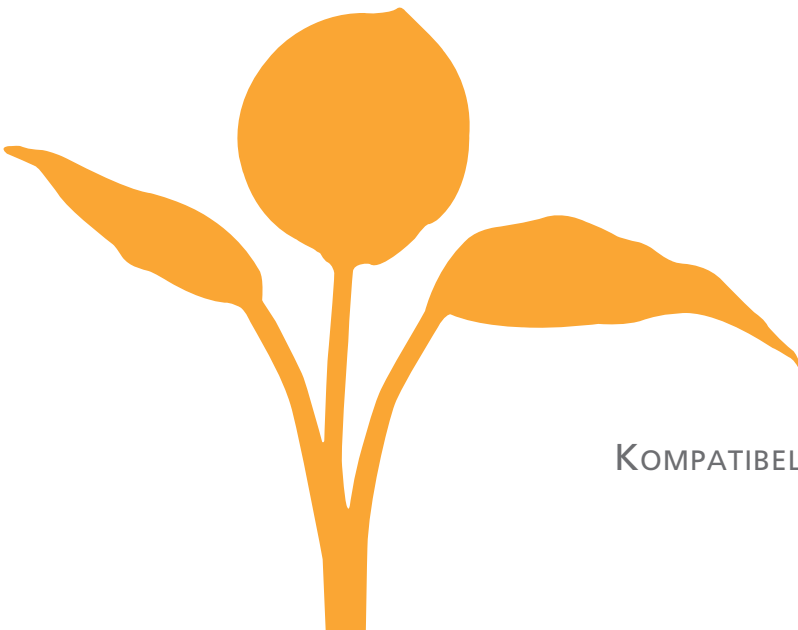

KOMPATIBEL – EINFACH – ÜBERSICHTLICH

Ein komplettes System für jeden Anspruch

Für jede Phase im Behandlungsablauf bietet Telio ein entsprechend abgestimmtes Angebot. Es gibt spezielle Materialien zur Herstellung von Provisorien mit einer kurzen Tragedauer, aber auch massgeschneiderte Lösungen für Provisorien mit mittlerer bis langer Tragedauer. Neben den hohen ästhetischen Ansprüchen ist auch die grosse funktionelle Belastung entscheidend.

Alle Telio-Produkte sind materialtechnisch kompatibel und farblich optimal aufeinander abgestimmt. So bieten sie eine hohe Flexibilität und sind anwenderfreundlich.

Telio ist die kompatible Systemlösung für Provisorien.



LIEFERFORMEN

Telio CS

Telio CS C&B Starter Kit

Art.-Nr.

628244



Telio CAD

Telio CAD for CEREC Starter Kit

Telio CAD for PlanMill Starter Kit

Telio CAD Abutment Solution CEREC/inLab Kit

631697

665636

668886



Telio CAD ist auch über Fräszentren erhältlich.

Telio Lab

Telio Lab Starter Kit A2/A3

Telio Lab Basic Kit

Telio Lab LC Veneer Kit

628055

628054

632464



Alle Produkte sind auch als Einzelrefills erhältlich.



Dies ist ein Produkt aus unserer Kategorie Festsetzende Prothetik.
Produkte aus dieser Kategorie sind jeweils optimal aufeinander abgestimmt.

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
 Bendererstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tel. +423 235 35 35
 Tel. +423 235 33 60
 Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
 Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
 73479 Ellwangen, Jagst
 Tel. +49 7961 8890
 Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de